

# FOREO



## ISSA™ mini 2

VEĽKÁ INOVÁCIA  
MALEJ ZUBNEJ KEFKY



# KOMPLETNÝ NÁVOD NA POUŽITIE



## ZAČÍNAME

Gratulujeme vám, práve ste kúpou ISSA mini 2 podnikli prvý krok k belšiemu a jasnejšiemu úsmevu. Skôr než začnete využívať všetky výhody sofistikovanej a štýlovej dentálnej hygieny v pohodlí svojho domova, vyhradte si niekoľko minút na preštudovanie pokynov v tomto návode.

URČENIE POUŽITIA: Na domáce použitie a celkovú ústnu hygienu spôsobom čistenia zubov a ďasien.


PREČÍTAJTE SI PROSÍM VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM a používajte tento produkt iba na jeho určené použitie podľa pokynov v tomto návode.

⚠ VAROVANIE: Vybavenie sa nesmie nijako upravovať.

## PREHĽAD ISSA mini 2

ISSA mini 2 je perfektná pre všetkých, keďže je vyrobená zo silikónu odolného voči baktériám, má 3D-flexibilnú hybridnú hlavicu kefkы a ponúka T-sonické pulzovanie s dvojnásobným výkonom. Vďaka hravému dizajnu a funkciám hodným úsmevu ISSA mini 2 zaisťujú úplnú starostlivosť o ústnu dutinu a ozvláštnia dvojminútové čistenie zubov každých 12 hodín. S výnimočne dlhou životnosťou batérie, iba hodina nabíjania cez USB nabije vašu trendy kefkы až na 265 dní!

## SPOZNAJTE VAŠU ISSA mini 2

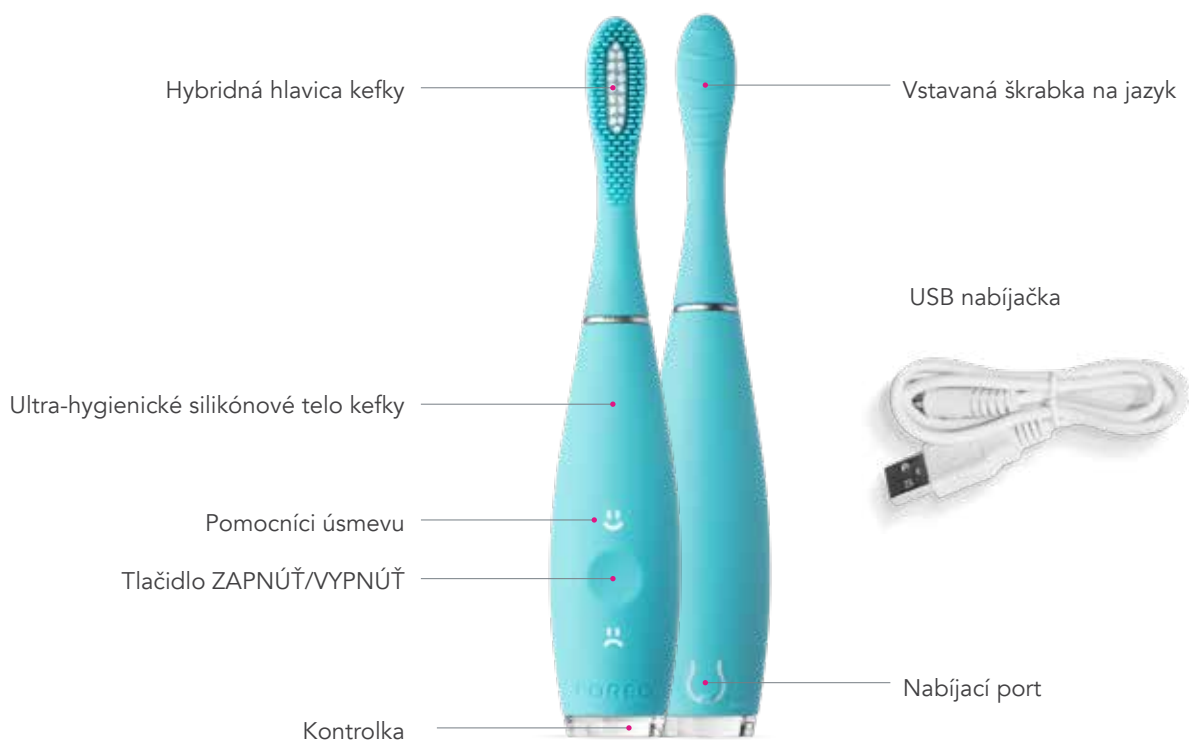

## FUNKCIE

### Tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ:

- Stlačte tlačidlo raz a zapnete kefku, stlačte tlačidlo opäť a vypnete kefku
- Po 3 minútach sa kefka ISSA mini 2 automaticky vypne, aby sa zabránilo nadmernému používaniu

### Pomocníci úsmevu:

- Po skončení 2-minútového čistenia sa na kefke objaví nápis „Glee“ (škorodadosť)
- Keď ste si zuby nečistili viac ako 12 hodín, objaví sa nápis „Glum“ (zarmútený)

**Hybridná hlavica kefky** - Silikónové štetiny z polyméru PBT sú nemilosrdné k povlaku a jemné voči dásnám

**Ultra-hygienické silikónové telo kefky** - Je nepórové a tak menej zachytáva baktérie

**Kontrolka** - Bliká, keď treba čistiť ďalší kvadrant ústnej dutiny a keď treba kefku nabiť

**Nabíjací port** - Utesňuje zariadenie, čím je 100% vodovzdorné, a použiteľné v sprche

**USB nabíjačka** - S USB káblom nabíjate hocikedy a hocikde

## AKO POUŽÍVAŤ ISSA mini 2

*Nemusíte meniť čistiace návyky, stačí kefku!*




- 1. Aplikácia zubnej pasty** - Použite odporúčané množstvo vašej oblúbenej pasty. Pre čo najlepšie výsledky odporúčame použiť zubnú pastu FOREO naturals smile-perfecting.
- 2. Čistenie** - Stlačte stredné tlačidlo a zapnete ISSA mini 2. Krúživými pohybmi jemným tlakom čistite zuby 2 minúty. ISSA mini 2 vám naznačí, že máte prejsť na ďalší zubný kvadrant každých 30 sekúnd.
- 3. Opláchnutie** - Stlačením stredného tlačidla vypnete zariadenie. Opláchnite si ústa a očistite ISSA mini 2 pod tečúcou vodou. Pre príjemnejší a jasnejší úsmev opakujte dvakrát denne!
- 4. Škrabka na jazyk (voliteľné príslušenstvo)** - Pre kompletne vyčistenie úst vymeňte hlavicu kefky za škrabku na jazyk, a jemne čistite jazyk vertikálnymi pohybmi.

**VAROVANIE:** Ak počas používania zariadenia FOREO spozorujete nejaké nepríjemnosti, okamžite ho prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Ak na povrchu kefky objavíte krv, očistite kefku s mydlom a vodou.

## ČISTENIE ISSA mini2

Čistite zariadenie po každom použití, umyte kefku teplou vodou a pritom prstami prečistite štetiny. Na čistenie tela kefky ISSA mini 2 odporúčame použiť silikónový čistiaci sprej spoločnosti FOREO, a pre optimálne výsledky ju opláchnuť teplou vodou. Nechajte zariadenie uschnúť voľne na vzduchu. Neodporúčame umiestniť ISSA mini 2 do UV žiariča.

POZNÁMKA: Nikdy kefku nečistite výrobkami obsahujúcimi alkohol, benzín či acetón. Na zariadení nepoužívajte bieliace zubné pasty.

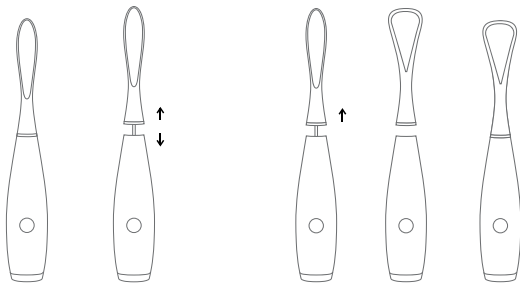

## VÝMENA HLAVICE ISSA MINI 2 - VYTIAHNITE JU A NESAĎTE ĎALŠIU

Všetky hlavice kefky ISSA sú kompatibilné s ISSA 2.

Ak chcete vymeniť hlavicu kefky, uistite sa, že je kefka ISSA mini 2 vypnutá, vytiahnite hlavicu kefky a odpojte ju zo zariadenia. Vložte kovový spojovací kolík do diery v strede a zatlačte hlavicu dolu, aby ste ju bezpečne upevnili, pričom štetiny výmennej hlavice musia smerovať dopredu.

Pre maximálny efekt odporúčame vymieňať hlavice kefky ISSA mini 2 každých 6 mesiacov. Každá hlavica kefky sensitive a škrabka na jazyk vydržia až 1 rok.

Výmenné hlavice si môžete objednať na [www.foreo.com](http://www.foreo.com) alebo kontaktujte vášho najbližšieho autorizovaného predajcu FOREO.

## NABÍJANIE ISSA mini 2

Ak intenzita pulzov slabne, alebo ak kontrolka začína blikať, znamená to, že musíte nabiť kefku. Pripojte nabíjací USB kábel do akejkoľvek zásuvky a nabíjajte 1 hodinu. Keď kontrolka prestane blikať, kefka ISSA mini 2 je plne nabitá.

VAROVANIE: Pred nabíjaním sa uistite, že sa nabíjací port a nabíjačka nenachádzajú v blízkosti vody či zvyškov zubnej pasty. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie FOREO počas nabíjania a NENABÍJAJTE ho dlhšie než 24 hodín. Používajte iba nabíjací USB kábel od spoločnosti FOREO.

## DÔLEŽITÉ

V ZÁUJME OPTIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI:

- Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa o používaní zariadenia ISSA mini 2 s vaším lekárom.
- Ak podstupujete akúkoľvek liečbu ústnej dutiny, poraďte sa o používaní kefky s vaším zubárom.
- Ak počas používania prístroja FOREO spozorujete nejaké nepríjemnosti, prístroj okamžite prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Nenechávajte zariadenie na priamom slnku a nikdy ho nevystavujte vysokým teplotám či vriacej vode.
- Zariadenie nie je určené pre deti do 5 rokov. Ak sa zariadenie používa v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Taktiež je potrebné oboznámiť s pravidlami používania deti a osoby so zníženými fyzickými a psychickými schopnosťami.
- Deti by sa nemali so zariadením hrať.
- Ak sa vám zdá, že je výrobok poškodený (hlavica, rukoväť, nabíjačka), prestaňte ho používať. Tento výrobok neobsahuje žiadne časti, ktoré možno opraviť.
- Aby sa predišlo elektrickému šoku, zariadenie musí byť napojené iba do uzemnenej zásuvky.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

*V prípade zmeny vo výkone kefy ISSA mini 2 je nutné vykonať tieto opatrenia*

*Nie je ISSA mini 2 aktívna po stlačení stredného tlačidla?*

- Batéria je vybitá. Nabite kefy ISSA mini 2.

*ISSA mini 2 sa nedá vypnúť a/alebo tlačidlá nereagujú?*

- Mikro procesor je dočasne nefunkčný. Pripojte nabíjací kábel na opätovné fungovanie.

*Kontrolka ISSA mini 2 po pripojení nabíjačky neblinká?*

- Batéria je plne nabitá a pripravená na 265-dňové čistenie.
- Batéria je úplne vybitá a potrvá niekoľko minút, kým sa potvrdí spojenie s nabíjacím káblom.
- Nabíjací kábel nie je správne zapojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku alebo USB zásuvku a nabíjací port.

*Spadla kefy ISSA mini 2 do vody a nabíjací port je mokrý?*

- Vysušte ju a pokračujte v používaní. ISSA mini 2 je úplne vodovzdorná a nabíjací port je plne utesnený.

Ak ste v časti riešenie problémov nenašli odpovede na vaše otázky v súvislosti s prevádzkou zariadenia, alebo ak máte ďalšie otázky, navštívte sekciu Starostlivosti o zákazníkov na [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

### REGISTRAČNÁ ZÁRUKA

Pre aktivovanie 2-ročnej obmedzenej záruky a 10-ročnej záruky kvality zaregistrujte číslo, ktoré je na magnetickej stieracej karte FOREO, na [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

### 2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie na obdobie DVOCH (2) ROKOV po pôvodnom dátume nákupu, ktorá sa vzťahuje na chybné spracovanie či materiály, ktoré vzniknú pri normálnom používaní zariadenia. Záruka sa vzťahuje na súčasti, ktoré majú vplyv na funkciu zariadenia. Záruka sa NEVZŤAHUJE na kozmetické chyby spôsobené bežným opotrebovaním, alebo škody spôsobené nehodou, nesprávnym používaním či nedbanlivosťou. Pri akomkoľvek pokuse o otvorenie či rozobratie zariadenia (alebo jeho súčastí) zaniká nárok na záruku.

Ak počas záručného obdobia zistíte chybu a upovedomíte o tom spoločnosť FOREO, spoločnosť FOREO podľa vlastného uváženia vám bezplatne vymení staré zariadenie za nové. Nárok na uplatnenie záruky musí byť podložený rozumnými dôkazmi, ktoré potvrdia, že bol uplatnený v priebehu trvania záručného obdobia. Pre prípad uplatnenia záruky si uchovajte doklad o nákupe spolu s týmito záručnými podmienkami počas celého obdobia trvania záruky.

Ak si chcete uplatniť záruku, prihláste sa do svojho účtu na [www.foreo.com](http://www.foreo.com) a zvolte možnosť uplatnenia záruky. Cena za dopravu sa nevracia. Tento záväzok patrí k vašim právam zákazníka a tie neovplyvňuje žiadnym spôsobom.

### 10-ROČNÁ ZÁRUKA KVALITY

V nadväznosti na podmienky DVOJ (2) ročnej obmedzenej záruky spoločnosti FOREO, DESAŤ (10) ročná záruka kvality spoločnosti FOREO umožňuje vlastníkom zakúpiť si nové zariadenie na stránke [www.foreo.com](http://www.foreo.com) s 50%-nou zľavou.

\*2-ročná obmedzená záruka a 10-ročná záruka kvality sa nevzťahujú na výmenné hlavice kefy.

## INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Likvidácia starého elektronického vybavenia (platí v EÚ a ďalších európskych štátoch so systémami separovaného zberu odpadu).

Symbol prečiarknutého kontajnera na odpad znamená, že so zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale by sa mal odovzdať na príslušnom zbernom mieste na účely recyklácie elektrického a elektronického vybavenia. Zabezpečením správnej likvidácie zariadenia predídete potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie človeka, ktoré by mohli byť dôsledkom nevhodnej likvidácie produktu. Recyklácia materiálov zároveň pomôže ochrániť prírodné zdroje.


Viac informácií o recyklácii zariadenia vám poskytnú pracovníci služieb miestnej likvidácie domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste si zariadenie kúpili.



## ODSTRÁNENIE BATÉRIE:

POZNÁMKA: Tento proces nie je vratný. Pri otvorení zariadenia zaniká nárok na záruku. Zariadenie sa môže otvárať iba pred jeho likvidáciou.

Keďže zariadenie obsahuje lítiovo-iónovú batériu, batéria sa musí pred likvidáciou odstrániť a nesmie sa vyhodiť spolu s domovým odpadom. Na odstránenie batérie vytiahnite hlavicu kefky, odlepte silikónový kryt, otvorte plastovú krabičku a odstráňte batériu a likvidujte ju v súlade s miestnymi nariadeniami na ochranu životného prostredia. Z dôvodu bezpečnosti počas tohto procesu majte na rukách ochranné rukavice. Podrobnejšie pokyny nájdete nižšie na obrázkoch:

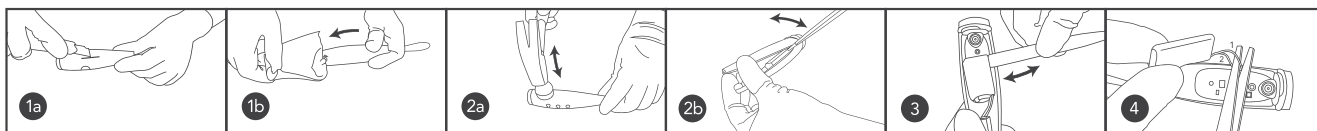

## ŠPECIFIKÁCIE

MATERIÁLY: FARBÝ:	Lekársky silikón + PBT polymér Wild Strawberry, Enchanted Violet, Mango Tango, Summer Sky
VELKOSŤ:	184 × 37 × 76,4 mm
HMOTNOSŤ:	57,7g
BATÉRIA:	420 mAh
OBDOBIE POUŽÍVANIA:	až do 265 dní
POHOTOVOSTNÝ REŽIM:	180 dní
FREKVENCIA:	140 Hz
ROZHRANIE:	1 tlačidlo
PULZOVANIE/MIN:	Až do 9,000

### ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY POUŽÍVANIA:

Teplota:	5° až 40° Celzia
Vlhkosť:	40% až 80%
Atmosférický tlak:	800 až 1,060 hPa

### ENVIRONMENTÁLNE PODMIENKY NA USKLADNENIE A DOPRAVU:

Teplota:	-10° až 50° Celzia
Vlhkosť:	30% až 80%
Atmosférický tlak:	500 až 1,060 hPa

### ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI:

Používatelia zariadenia tak konajú na vlastné riziko. Ani spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú zodpovednosť za telesné alebo iné poranenia alebo škody, fyzické alebo iné, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo v dôsledku použitia tohto zariadenia. Spoločnosť FOREO si navyše vyhradzuje právo na príležitostnú revíziu obsahu týchto pokynov a ich zmenu bez povinnosti niekoho o takejto revízii alebo zmenách informovať.

V záujme zvýšenia kvality možno model zmeniť bez oznámenia.

©2017/2018 FOREO AB. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR V EÚ:  
FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ŠTOKHOLM, ŠVÉDSKO  
DOVOZCA A DISTRIBÚTOR V USA:  
FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS,  
NV 89109, USA  
VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU FOREO AB  
NÁVRH A VÝVOJ: FOREO ŠVÉDSKO.

WWW.FOREO.COM